

Características Principales

Es un dispositivo terapéutico neuro-ortopedico con una superficie inestable la cual puede ajustarse para el tratamiento de posturas patológicas, especialmente con respecto a la inestabilidad funcional segmental de las articulaciones de miembros inferiores.


¿Cómo usarlo?

El **Posturomed** es usado en **rehabilitación neuro-ortopédica y terapia del dolor** así como para **entrenamiento sensoriomotor**, con los siguientes objetivos:

- a) Estabilización funcional (segmental) de las articulaciones de carga.
- b) Parte del tratamiento en la terapia de dolor, especialmente en conexión con el dolor crónico de espalda y dolor postural afectando el sistema motor.
- c) Entrenamiento preventivo de la coordinación.

Inestabilidad ajustable

Poder ajustar la inestabilidad de la superficie es crucial para medir el desempeño de la coordinación segmental. Los ejercicios realizados en el **POSTUROMED** resultan en una constante acción evasiva de la acción de la superficie, la cual desestabiliza al paciente cuando está parado sobre una sola pierna en un período corto de tiempo.

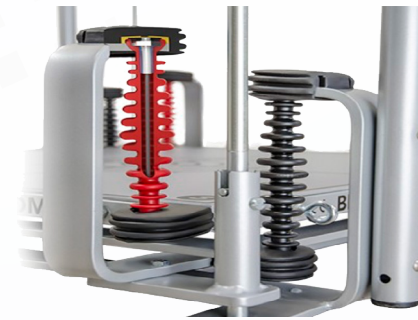

Frenos

La inestabilidad de la superficie terapéutica se ajusta simplemente liberando los frenos localizados en las esquinas de la superficie terapéutica.

Seguridad del paciente

Durante el ejercicio, el paciente nunca se sentirá inseguro, ya que no existe riesgo de que resbale. Los ejercicios son completamente seguros, incluso para los pacientes con endoprótesis de cadera.

Parámetros Técnicos

- 106cm de alto
- 90 x 85cm
- 45kg

